



Video:
v1935.dk/vpl

VELA Person Lift giver kørestolsbrugere mulighed for at komme ind i de fleste biler - enten som passager eller chauffør. Den gør det nemt at forflytte mellem en kørestol og et bilsæde og er enkel at betjene for brugeren og hjælperen. Den er let at montere, samle og bruge i de fleste biler uden at ændre på køretøjet. VELA Person Lift kan desuden også anvendes som løfteanordning i hjemmet.

FORDELE

VELA Person Lift er en meget fleksibel personløfter til kørestolsbrugere. Den kan bruges i næsten alle biler uden at ændre på køretøjet.

Det kræver et tilpasset beslag, der er kompatibelt med bilens dørhængsel, for at installere VELA Person Lift i bilen.

VELA Person Lift er mobil og nem at flytte, så den også kan anvendes til forflytninger i brugerens hjem, f.eks. i soveværelset eller badeværelset.

Denne lift er nem at installere, montere og fjerne. Desuden har den et højt løfteområde og passer derfor til de fleste køretøjer inkl. SUV'er.

:: Ubesværet forflytning fra kørestol til alle typer af bilsæder med VELA Person Lift

:: Kompatibel med de fleste biler uden at ændre på køretøjet

:: Enkel betjening med to knapper

:: Nem montering og afmontering, f.eks. ved brug i flere køretøjer

:: Den kan bruges som en personløfter i brugerens hjem sammen med et vægbeslag eller en mobil base




VELA Person Lift

FUNKTION

Løftekapacitet (SWL)	125 kg
Løftehøjde	60 cm
Fremadgående bevægelse	21 cm
Styring	Manuel styring (driftskraft 4N)

MÅL OG VÆGT

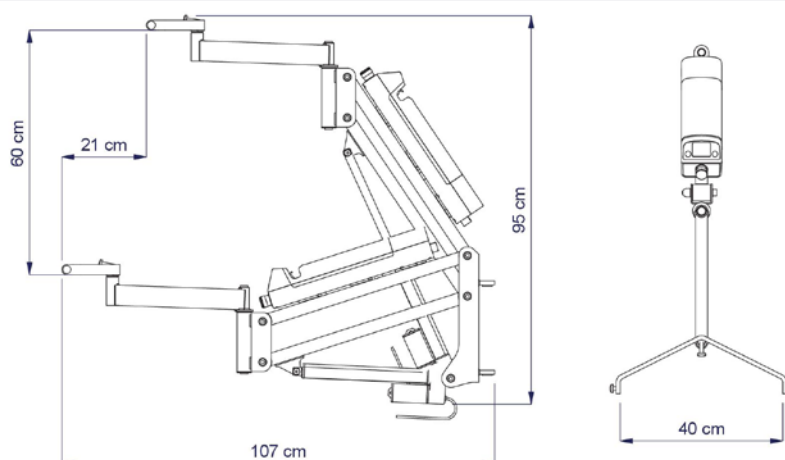

Vægt	9 kg
Nødstop	Ja
Tænd/Sluk (on/off)	Automatisk, når personløfteren bruges
Beskyttelse mod overbelastning	Automatisk
Beskyttelse mod dyb batteriafladning	Automatisk
Strømforsyning	24V DC, 10A
Oplader	Input: 100-240V – 50/60Hz, 0,5A Output: 28V 0,8A
Batteri	24V DC/2.9 Ah
Batterikapacitet	Ca. 50 løft (afhængig af forhold)
Brugscyklus (duty cycle)	Maks. 2 min ON/18 min OFF
Opladningstid	4 timer
Driftstemperatur	+5°C til +45°C
HMI-nr.	131295

TILBEHØR

VELA Person Lift har et udvalg af tilbehør, såsom en mobil base og et vægbeslag, så liften også kan bruges som en bærbar løfteanordning i brugerens hjem. Den er ideel til indendørs brug i soveværelset eller badeværelset og monteres på samme måde som i en bil.

- :: VELA Person Lift kan let skilles ad uden brug af værktøj og kan opbevares i bilens bagagerum.
- :: Batteriet er nemt at afmontere fra liften, f.eks. ved behov for opladning.

Få mere information på www.vela.dk.

HØJ KVALITET SIDEN 1935

Hos VELA laver vi kvalitetsprodukter til det siddende menneske. Vi stræber efter øget trivsel og forbedret livskvalitet for de mennesker, der bruger vores produkter.

Vores produkter bruges typisk mange timer dagligt. Derfor bruger vi robuste kvalitetsmaterialer med holdbare mekaniske dele, så produkterne forbliver funktionelle og pæne i mange år.

Alle produkter fra VELA er godkendte hjælpemidler og er CE-mærkede i henhold til det europæiske medicinske regulativ. Derudover er vi certificeret i ISO9001 og ISO14001, der er internationalt anerkendte standarder ift. kvalitet og miljø.